


# AUGEN-NOTFALLPLAN

| Schadstoff-Einwirkung                                                  | Empfohlene Spüllösung                                                                                                                | Anwendung                                                                             | Fortsetzung bis zur ärztlichen Behandlung                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fremdkörper</b><br>z.B. Staub, Schmutz,<br>Metall- und Holzsplitter |  <b>ACTIOMEDIC®</b><br>Natriumchloridlösung (0,9%)  | Augen so lange spülen bis die<br>Fremdkörper herausgewaschen sind.                    |  Spülung mit <b>ACTIOMEDIC®</b><br>Natriumchloridlösung (0,9%)  |
| <b>Säure</b>                                                           |  gepufferte Spüllösung<br><b>BioPhos®74</b>         | Augen mit <b>BioPhos®74</b> ca. 2,5 Minu-<br>ten spülen bis die Flasche entleert ist. |  Spülung mit <b>ACTIOMEDIC®</b><br>Natriumchloridlösung (0,9%)  |
| <b>Laugen</b>                                                          |  gepufferte Spüllösung<br><b>BioPhos®74</b>         | Augen mit <b>BioPhos®74</b> ca. 2,5 Minu-<br>ten spülen bis die Flasche entleert ist. |  Spülung mit <b>ACTIOMEDIC®</b><br>Natriumchloridlösung (0,9%)  |
| <b>Sonstige Schäden</b><br>z.B. Lösemittel und Öle                     |  <b>ACTIOMEDIC®</b><br>Natriumchloridlösung (0,9%) | Augen so lange spülen bis das<br>unangenehme Gefühl nicht mehr<br>spürbar ist.        |  Spülung mit <b>ACTIOMEDIC®</b><br>Natriumchloridlösung (0,9%) |



Entnehmen Sie die Flasche aus der Augenspülstation, bzw. dem Augenspülkoffer.

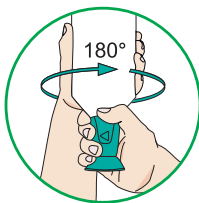

Drehen Sie die Augenschale um 180° in Richtung des Pfeils bis die Versiegelung bricht.



Legen Sie den Kopf in den Nacken und spülen Sie das Auge gleichmäßig.



Beugen Sie sich vor dem Absetzen der Flasche nach vorn um Ihre Kleidung vor Nässe zu schützen.



**WICHTIG:** Spülen Sie das Auge stets mit einem gleichmäßigen weichen Strahl und halten Sie es dabei weit geöffnet. Drücken Sie die Flasche beim Spülen leicht.


Bei jeder Augenverletzung / -verschmutzung ist unverzüglich ärztlicher Rat einzuholen! Setzen Sie die Spülung unbedingt mit Natriumchloridlösung (0,9%) fort bis ein Arzt konsultiert wurde.

# EYE EMERGENCY PLAN

| Pollutants influence                                                 | Recommended eye wash solution                                                                                                  | Instructions for use                                                                     | Continue until medical attention                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foreign bodies</b><br>such as dirt, dust, metal or wood splinters |  Sodium chloride solution (0,9%)              | Rinse the eyes until the foreign bodies are washed out.                                  |  Rinse with sodium chloride solution (0,9%)  |
| <b>Acid</b>                                                          |  Buffered eye wash solution <b>BioPhos®74</b> | Rinse the eyes with <b>BioPhos®74</b> for approx. 2,5 minutes until the bottle is empty. |  Rinse with sodium chloride solution (0,9%)  |
| <b>Alkali</b>                                                        |  Buffered eye wash solution <b>BioPhos®74</b> | Rinse the eyes with <b>BioPhos®74</b> for approx. 2,5 minutes until the bottle is empty. |  Rinse with sodium chloride solution (0,9%)  |
| <b>Other</b><br>for example caused by solvent, oil                   |  Sodium chloride solution (0,9%)             | Rinse the eyes until the unpleasant feeling is gone.                                     |  Rinse with sodium chloride solution (0,9%) |



Remove the bottle from the eye wash station resp. the eye wash case.

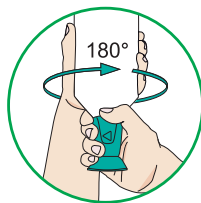

Turn the eye cup 180° in the direction of arrow until the sealing brakes.



Lean your head back and rinse the affected eye consistently.



Lean your head forward before putting the bottle down to protect your clothes from wetness.



**IMPORTANT:** Rinse the eye always consistently and carefully, and thereby keep the eye wide open. Press the bottle slightly while rinsing.

In any case of eye damage, contamination, consult a doctor immediately! Continue rinsing with sodium chloride solution (0,9%) until medical advice is given.